

機械器具(39) 医療用鉗子
一般医療機器 鉗子 10861001


子宮傍組織鉗子

【警告】

- 本品を改造しないこと。
[破損の原因になります。]

【形状・構造及び原理等】

●形状（代表例）

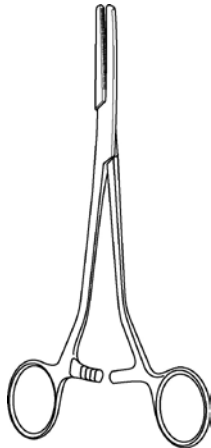

●材質 ステンレス製

●原理

本品のリング状の近位端を開閉することで、遠位端の把持部が開閉し、臓器、組織又は血管を把持、結合、圧迫又は支持できる。

【使用目的、効能又は効果】

本品は、臓器、組織又は血管を把持、結合、圧迫又は支持するために用いる手術器具をいう。本品は再使用可能である。

【品目仕様等】

外観：目視検査にて表面に機能を損なうような欠陥、又は汚染物を認めない。

【操作方法又は使用方法等】

- (1) 使用前に本品が洗浄・滅菌されていることを確認し、さらに傷や亀裂、曲がり、先端部の損傷、可動部の異常等がないことを確認します。異常が発見された場合は使用を中止します。
- (2) 使用后、本品に異常がないことを確認し、万一、破損・欠損等がある場合は、患者の体内に欠損物を残している可能性があります。また、本品に血液、体液、組織および薬品等が付着している場合は、乾燥・固化しないうちに、できるだけ早く洗浄します。
- (3) 洗浄後は滅菌し、次の使用に備えて適切に保管してください。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 本品をクロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)患者、またはその疑いのある患者に使用した場合は、CJDに関する国内規制及びガイドライン等を遵守すること。
- ステンレス鋼は錆びを生じにくい金属であっても、洗浄・保管等が不適切な場合は錆びを生じるので、使用前に確認すること。
- 折れの原因となるので、本品に過剰な応力をかけないこと。また、錆が生じていた場合は、その部分から折れやすくなるので、確認すること。

2. その他の注意

- 本品を購入後、はじめて滅菌する場合は、油引き等の防錆処理がなされているため、予め洗浄処理を行なうこと。
- 本品を使用目的以外の目的で使用しないこと。
- 過度の力を加えたり、無理な力を加えて使用しないこと。[器具の損傷の原因になります。]

【保守・点検に係る事項】

1. 洗浄

- 感染防止のため、使用後はできるだけ早く、血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄します。
- 洗剤の使用に際しては、洗剤の添付文書を参照してください。
- 洗浄装置(超音波洗浄装置、ウォッシャーディスイネフエクタ等)で洗浄するときには、器具同士が接触して先端部を損傷することがないように注意します。また、関節部等の可動部分は開放して、汚れが落ちやすいようにバスケット等に収納します。
- 洗剤の残留がないように充分すすぎをし、仕上げすすぎには精製水を用いることを推奨します。
- 強アルカリ/強酸性洗剤は、器具を腐食させるおそれがありますので、使用しないでください。誤ってこれらが付着したときには、直ちに水洗いをします。また、金属たわしやクレンザー(磨き粉)等は器具の表面を傷つけることがあるので、使用しないでください。

2. 消毒・滅菌

- 本品を滅菌する場合は、日本薬局方 参考情報 11. 微生物殺滅法 2. 滅菌法 2-1 加熱法に示される条件を準用してください。また、滅菌器に関する詳細は滅菌器の取扱説明書に従ってください。

滅菌条件

温度	時間
115～118℃	30 分以上
121～124℃	15 分以上
126～129℃	10 分以上

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 滅菌後、次の使用時までは、汚染のおそれのない方法で保管してください。

【参考文献】

- 医療現場における滅菌保証のガイドライン 2005
発行：日本医科器械学会
- 器械の正しいメンテナンス法 第8版 2004
日本語版翻訳・監修 日本医科器械学会 メンテナンスマニュアル出版委員会

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

■製造販売業者

アトムメディカル株式会社

〒338-0835 埼玉県さいたま市桜区道場 2-2-1

TEL:048-853-3661(大代表) FAX:048-853-0304(代表)

■外国製造所

国 名: Germany (ドイツ)

製造業者: Nopa instr. (ノパ社)